

**COLEMED PHARMA
ENDOLAZER**

980nm+1470nm COLEMED PHARMA ENDOLAZER




Çalışma Teorisi

980+1470nm lazer ile gerçekleştirilen lazer lipolizde yağ hücreleri çok hassas bir lazer ışını kullanılarak sıvılaştırılır. Lipoliz tedavisi sırasında yağ hücreleri lazer enerjisini emerek küçük parçalara ayrılarak vücut metabolizması tarafından uzaklaştırılır. aynı zamanda sıkılaştırma ve sıkma fonksiyonuna sahiptir.

Doku üzerinde tarif edilen etki, dalga boylarının endikasyona özel bir kombinasyonu aracılığıyla elde edilir; örneğin 1470 nm'lik bir dalga boyu, yağ dokusunun verimli bir şekilde buharlaştırılması ve üstteki bağ dokusunun sıkılaştırılması için en uygun koşulları üretir.

Kan damarlarının pıhtılaşması ise 980 nm tamamlayıcı dalga boyu kullanılarak sağlanır.

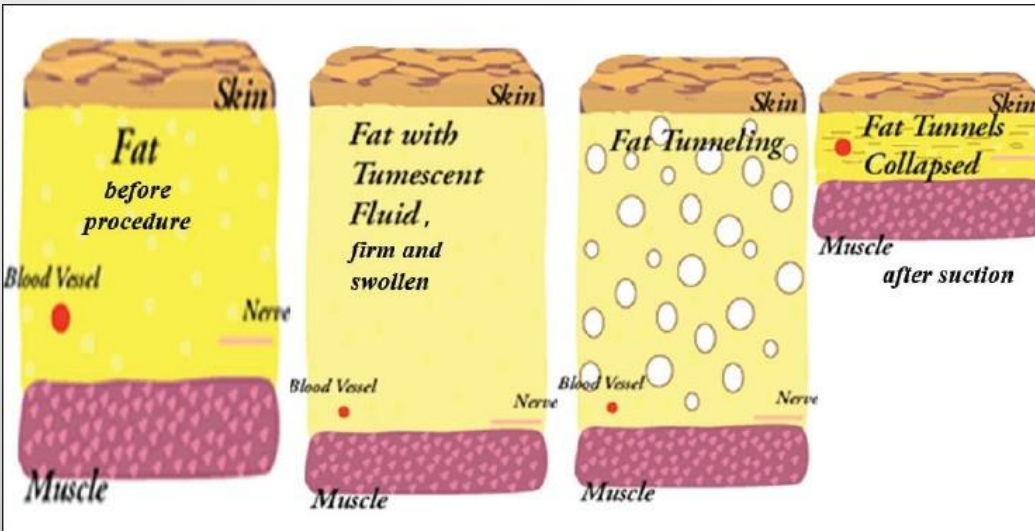

Lipoliz Nedir?

Lazer lipoliz, yağ hücrelerini yok etmek için lazer cihazlarından gelen ısıyı kullanan bir vücut şekillendirme işlemidir.

Lazer lipoliz (veya kısaca lazer lipo), yağ hücrelerini eritmek için ışık bazlı teknolojiye gelen ısıyı kullanan bir vücut şekillendirme tedavisidir. Esas olarak diyet veya egzersiz yoluyla kaybetmesi zor olan vücut yağlarını gidermeyi amaçlamaktadır, örneğin: * heybeler (üst dış uyluklarda yağ birikintileri) * aşk kolları (gövde etrafındaki göbek yağı) * gıdı Aynı zamanda alt çene çizgisi boyunca sarkan cildi, karın derisini hedef alan bir cilt sıkılaştırma ve yağ azaltma tedavisidir.

kalçalarda gevşeklik, selülit ve uyluk içi ve kol (bingo kanatları) ciltte sıkılaşma ve yağ eritmede etkilidir.

Bu işlemde herhangi bir kesi yapılmaz ve emme işlemi yapılmaz.

1. Doktor vücudunuzun tedavi edeceği bölgelerini işaretler.
2. Yatağa uzanıyorsunuz ve doktor özel aplikatörü cildinize yerleştiriyor.
3. Tedavinin ilk birkaç dakikasında cildinizin süreç boyunca rahat kalmasına yardımcı olan bir serinlik hissi hissedeceksiniz.
4. Bundan sonra, lazer yağ hücrelerinizi yok etmeye başladığında, dönüşümlü olarak sıcak ve soğuk hisler hissedeceksiniz. Bu durum tedavi tamamlanıncaya kadar devam edecektir.

Diyot Lazer Sistemi

HOŞGELDİNİZ

Diyot Lazer Sistemi

Damar Kaldırma

Endolift

Fizyoterapi

onikomikoz

Lütfen bekleyin ...



BAŞKA
FONKSİYONLAR

Diyot Lazer Sistemi

Kesme Modu

EVLT Modu

ENT Modu

Diş Modu

Jinekoloji Modu

PLDD Modu



980nm+1470nm diyot lazer

Endolift

zamanlayıcı

Enerji

W

Nabız

ms

Sıklık

Hz


CW Modu

Darbe Modu


Bekar



Yanında olmak

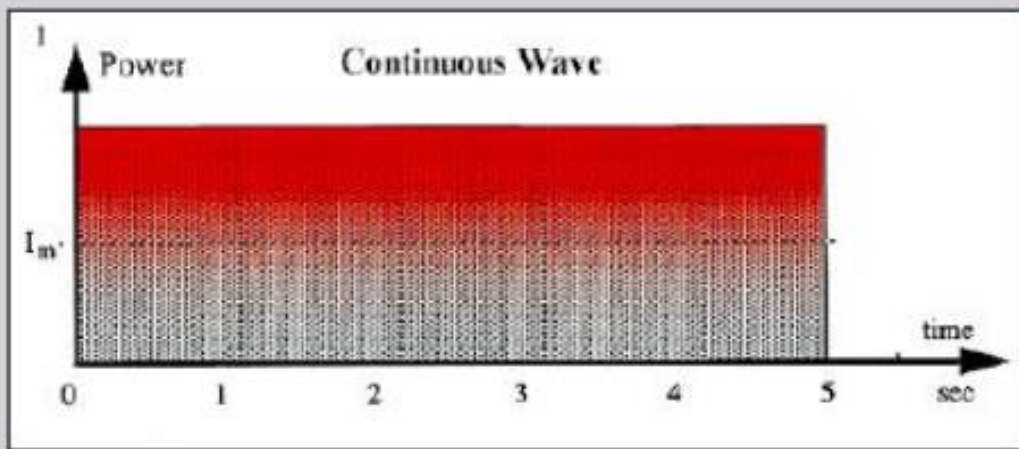

Continuous wave (CW)

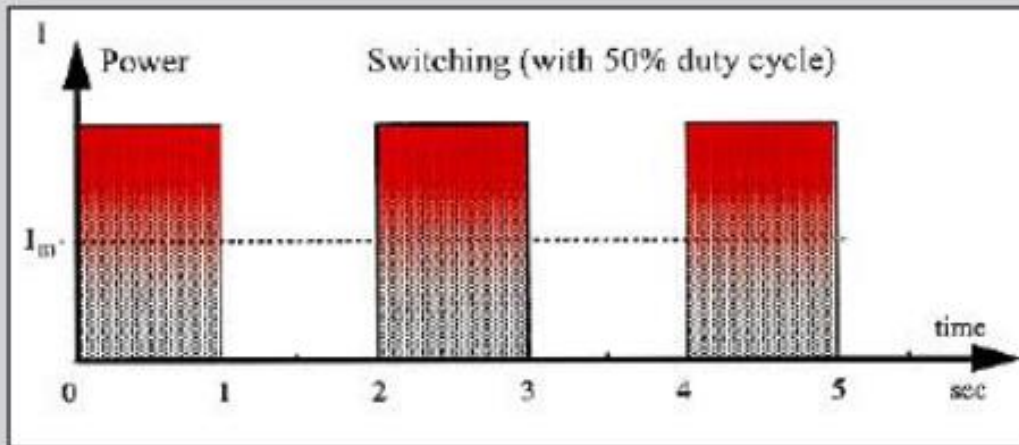

Modulated continuous wave



The terms pulsing and frequency are used interchangeably to describe the same concept.

Ameliyat için süreç



1 Fat test



2 Anesthesia




3 Make a incision



6 Get liquefied fat out



5 Laser melt fat

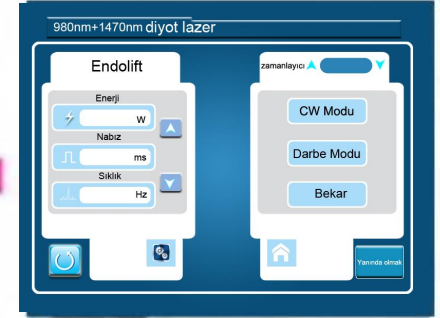

4 Set parameter

Diyot lazerimizin avantajı

1. 980nm diyot lazer liposuction piyasadaki en ileri teknolojidir. 980nm, 1470nm veya 980nm+1470nm gibi isteğe baęlı farklı dalga boyları.
2. Sabit çıkış gücü, tedavi sonucu tutarlılığını ve güvenliğini garanti eder.
3. Üç çalışma modu, CW Darbeli, Darbeli ve Devam, daha fazla konfor ve belirgin sonuçları garanti eder. Piyasalardaki en fazla Mod
4. Patentli sap iyi bir epidermis koruması sağlar
5. Üst donanıma sahip yedek parçalar, uzun ömür ve istikrarlı tedavi sonuçları sağlar.
6. 0.01-1s (adım 0.05s) saniyelik süre, ağrısız ve rahat.
7. Daha fazla talebiniz varsa, lütfen mühendis ekiplerimizin size yardımcı olmak için elimizden geleni yapacaklarını bize bildirin.

COLEMED PHARMA ENDOLAZER




Lipolysis Handpiece



Technical Data:

- Include 5 pieces cannula
- Suitable for 200~600um fiber

**COLEMED PHARMA
ENDOLAZER**

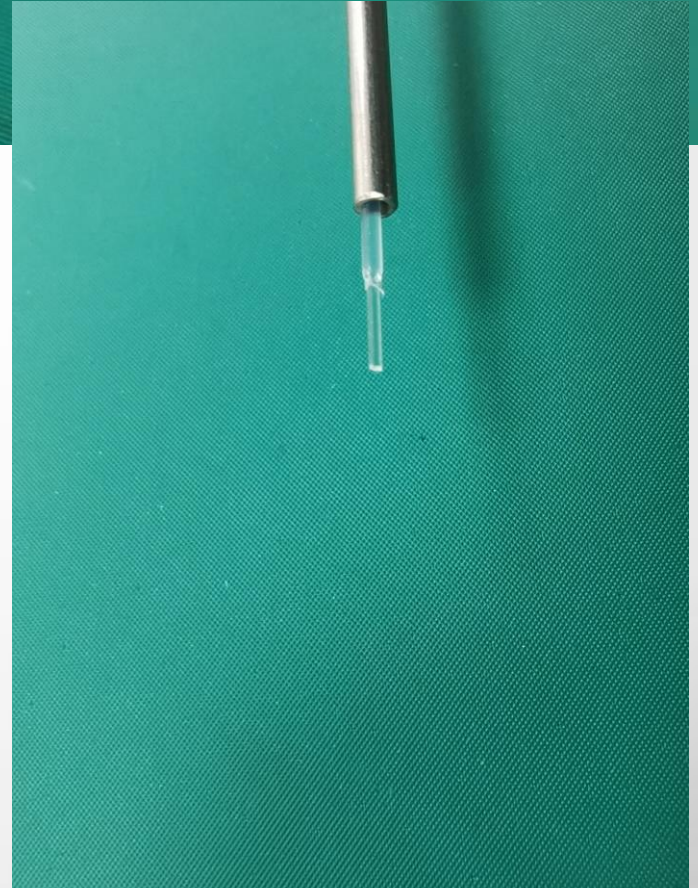

Teknik parametreler

Işın İletimi	Biquartz fiber optik iletim
Lazer Tipi	Darbe, CW, Tek Mod
Dalgaboyu	980nm+1470nm
Güç	1-30W
Darbe genişliği	0,01-1s (adım 0,05s)
Darbe gecikmesi	0,01-1s (adım 0,05s)
Pilot Işın	650nm Ayarlanabilir Kırmızı Diyot Lazer
Elyaf Çapı	400um fiber, 3M
Fiber konektörü	SMA905 Uluslararası Standart
İğneler	100mm, 150mm,200mm, 250mm, 300mm Standart için farklı uzunluklarda beş iğne
Güç gereksinimi	AC120V \pm 22V,60HZ \pm 1HZ/AC230V \pm 22V, 50HZ \pm 1HZ



Handpiece and needles



Protect Glasses



Protect Goggles

COLEMED PHARMA



Foot Switch



Power Cable



Handle holder



4 Free Fuses




Scissors only for fat removal



Kew switch



Shell and Package

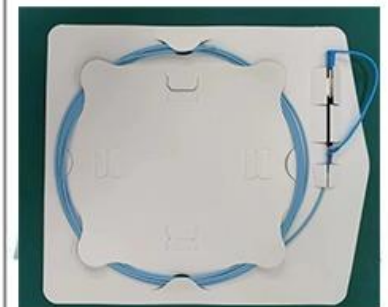

400um optical fiber

Öncesi ve Sonrası sonuçlar


Before




After



Before

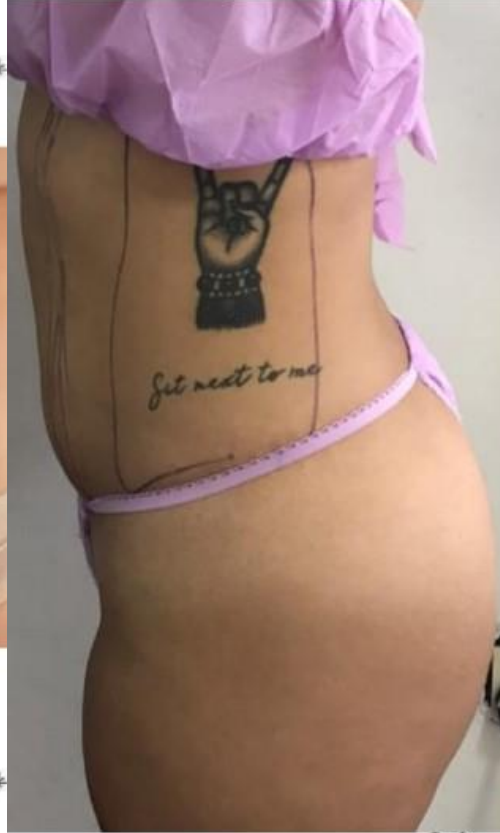

After

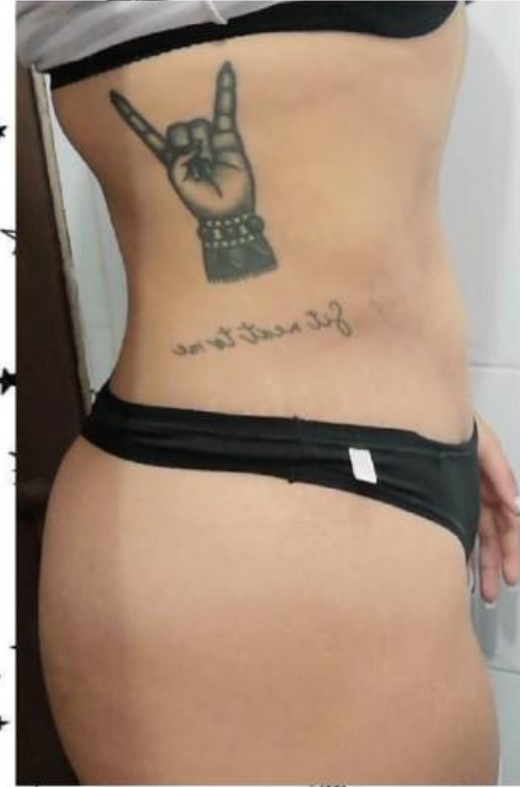


Avant

Après

COLEMED PHARMA
ENDOLAZER

1er séance

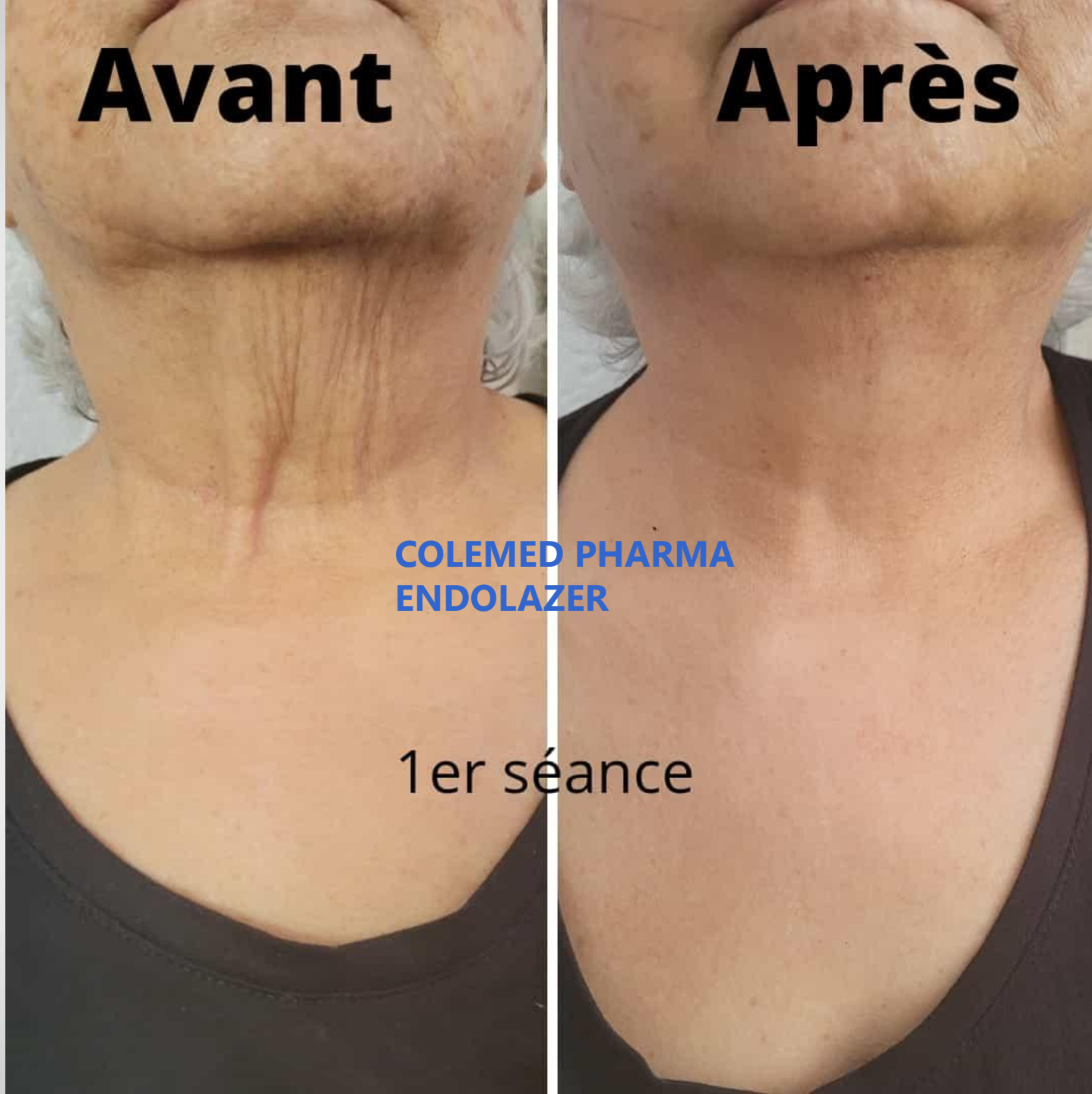



HOT SALE

980nm+1470nm Diode laser system

10 Functions in 1 Laser



**COLEMED PHARMA
ENDOLAZER**

Teşekkürler

COLEMED PHARMA ENDOLAZER